

---

## **Viktigt Säkerhetsmeddelande**

**Crocodile gånghjälpmedel tillverkad av R82 A/S**

**FSCA-identifikation 26 Augusti 2013**

**Korrigerande åtgärd: Byte av bult på Crocodile handtag från R82 A/S**

---

Datum: 26 augusti 2013


Mottagare: Läke-medelsverket Uppsala  
CA (marknader där Crocodile har distribuerats)  
Slutbrukare/Institutioner och Återförsäljare

### **Detaljer angående berörd produkt:**

Crocodile gånghjälpmedel stl 3 producerad av R82 A/S med artikelnummer 3186803 levererad från Gedved, Danmark, före 6 juni 2013.

### **Beskrivning av problem:**

Vi har blivit informerade om att bulten som fäster handtaget i ramen på Crocodile stl 3 har gått sönder. För att eliminera att ett sådant brott, som kan leda till att handtaget faller av kan uppstå används nu en 8.8 bult istället för en ursprunglig 12.9 härdad bult. Nya bultar är nu skickade för utbyte på produkter i marknaden.

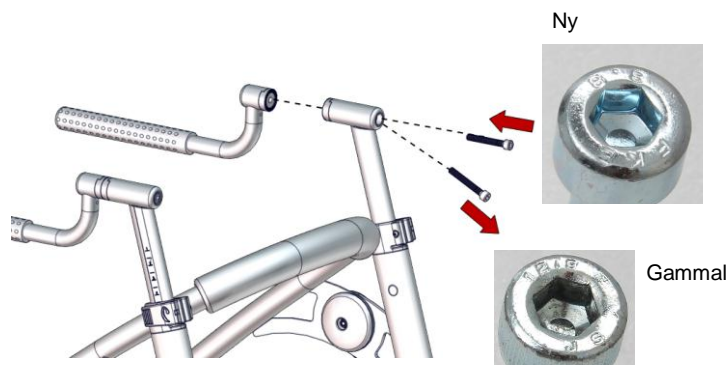

Om ni har ytterligare frågor kontakta Etac Sverige AB.

### **Distribution av detta Säkerhetsmeddelande: (om tillämpligt)**

Detta meddelande behöver vidarebefordras till dem som behöver känna till det inom organisationen och till organisationerna där produkterna används. (om tillämpligt)

Vänligen upprätthåll medvetenhet gällande detta meddelande och åtgärden under en lämplig period för att säkerställa utfallet av denna korrigerande åtgärd. ( om tillämpligt)

**Kontakt person:  
Kent Aatoftte Rasmussen  
Quality Manager  
R82 A/S  
Parallelvej 3  
DK-8751 Gedved  
E-mail: kar@R82.com  
Phone: +45 79685888**

R82 A/S

Kent Aatoftte Rasmussen  
Quality Manager